



QuikRead go[®] CRP

Vykonajte test, než začnete liečiť

- Spoľahlivý a vysoko kvalitný
- Najrýchlejšie CRP na trhu
- Lhké použitie – minimum ručnej práce



QuikRead go[®] CRP

QuikRead CRP je jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP).

V krvi zdravých ľudí sa CRP bežne vyskytuje vo veľmi nízkych koncentráciách. Hladina CRP sa výrazne zvyšuje u bakteriálnych infekcií, naopak u vírusových infekcií zostávajú hladiny CRP nízke alebo nulové. Okrem klinických príznakov sa teda môže meranie CRP využiť ako základný prvok pre odlišenie bakteriálnej infekcie od vírusovej. Monitorovanie hladiny CRP tiež poskytuje objektívnu informáciu pre hodnotenie odpovede na liečbu, kedy hladina CRP prudko klesá v dôsledku účinnej terapie.

Ak je vyšetrenie CRP vykonané pri návšteve pacienta priamo v ordinácii, má lekár výsledok CRP k dispozícii v priebehu konzultácie s pacientom a môže tak ľahko rozhodnúť o prípadnom užití antibiotík. Systém QuikRead go sa skladá z malého prístroja a sady reagensií, ktorá obsahuje všetko potrebné k vykonaniu testu. Sada reagensií je špeciálne navrhnutá k okamžitému použitiu v primárnej starostlivosti a poskytnutiu rýchlych výsledkov.

Vlastnosti a výhody testu QuikRead go CRP:

SPOLIAHLIVÝ:

- Vysoká kvalita – výsledky porovnateľné s výsledkami z laboratória
- Reprodukovateľný kvantitatívny výsledok CRP v meracom rozsahu 5-200 mg / l

RÝCHLY:

- Najrýchlejšie CRP na trhu
- Trvanie testu 2 minúty

ĽAHKÉ POUŽITIE:

- Minimum ručnej práce
- Automatická korekcia výsledku CRP na hematokrit
- Vykonáva sa zo vzorky krvi z prsta (prípadne žilovej krvi, plazmy alebo séra)



QuikRead go[®]

QuikRead go je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.




Orion Diagnostica Oy, Finland


Zastúpenie pre: ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, tel: +421 944 313 888, fax: +420 233 350 532
orion@oriondiagnostica.sk, www.oriondiagnostica.sk, www.quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go CRP sada, 50 testov <ul style="list-style-type: none">• s kapilármi a piestami• bez kapilár a piestov	135171 135283
QuikRead CRP kontrola 1ml	68296
QuikRead kapiláry, 50 ks	67962
QuikRead piesty, 50 ks	67966
QuikRead go prístroj	135867

Je to tak ľahké!

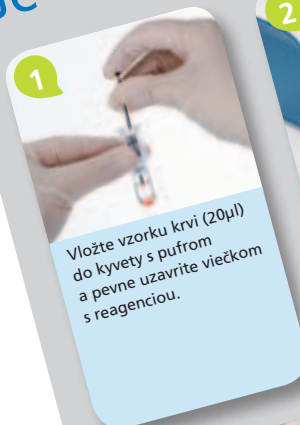


1 Vložte vzorku krvi (20µl) do kyvety s pufrum a pevne uzavrite viečkom s reagensiou.

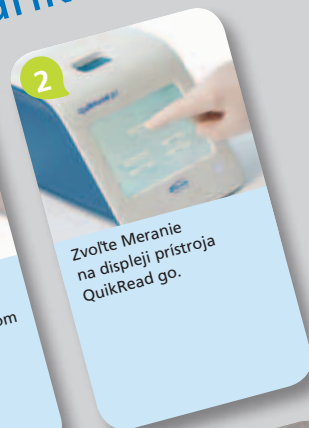

2 Zvoľte Meranie na displeji prístroja QuikRead go.



3 Vložte kyvetu do meracej komory čiarovým kódom k sebe. Displej prístroja zobrazuje priebeh merania.

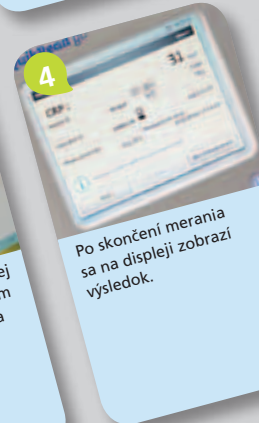

4 Po skončení merania sa na displeji zobrazí výsledok.